


RAIZER® M



Faktablad

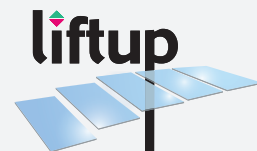

Løftestol til brug i hjemmet

Raizer M betjenes af én person alene. Det bidrager til at lette stressede situationer, idet løftet foretages hurtigt og effektivt af en pårørende i brugerens eget hjem. Den person, der er faldet, løftes op fra gulv til næsten stående stilling i løbet af få minutter.

Enkel og sikker at benytte

- ✓ **Anvendelse** – Raizer M samles hurtigt rundt om den liggende person (3 minutter).
- ✓ **Håndtering** – Et løft med Raizer M kræver kun et minimum af fysisk indsats.
- ✓ **Kun én hjælper** – Et løft med Raizer M kan udføres af en enkelt person.
- ✓ **Ergonomisk korrekt løft** – Hverken hjælperen eller den person, der skal løftes, bliver udsat for fysisk belastning.
- ✓ **Opbevaring** – let at pakke sammen og gemme væk.



Leveringen omfatter:

Løftestol, håndsving, sikkerhedssele.

Tilbehør:

Nakkestøtte, bæretaske, vægbeslag for opbevaring, trolley for nem transport, trappehjul til trolley, cykelbeslag til trolley, hygiejneovertræk, ekstra sikkerhedssele.

Tekniske specifikationer

Model:	Raizer M
Anvendelse:	Håndbetjent (af 1 person)
Driftscyklus:	1/5 min.
Mål (L x B x H):	Stående 540 x 880 x 1274 mm / Liggende 1322 x 880 x 277 mm
Løftekapacitet:	Max. 150 kg
Løftetid:	1-4 min.
Egenvægt:	Sæde 7,2 kg / Ben og ryglæn: 5,2 kg / i alt 12,4 kg
Arbejdstemperatur:	+5 °C til +40 °C
Forventet levetid:	Min. 5 år/1000 løft v. max. belastning
Materialer:	Sæde: PolyCarbonat + ABS/ Ryglæn: PolyCarbonat + ABS / Ben: Aluminium

Forbehold for tekniske modifikationer

Standarder

Raizer M er i overensstemmelse med:

Direktiv om medicinsk udstyr MDD 93/42/EEC. Medicinsk udstyr i klasse 1

Raizer M lever op til relevante krav i følgende standarder:

EN/ISO 10535:2006: Personløftere til forflytning af handicappede personer

DS/EN 12182:2012: Generelle krav og prøvningsmetoder for tekniske hjælpemidler til handicappede



Serviceeftersyn

Denne Raizer er primært tiltænkt brug i private hjem. Ved brug i private hjem skal Raizer ikke serviceres i dens forventede levetid. Dog anbefales eftersyn og lasttest, inden garantiens udløb (efter 2 år) og derefter hvert 2. år, i særdeleshed hvis Raizer anvendes hyppigt (flere gange om ugen) for at tilsikre sikker og problemfri brug.

Kontakt os:

LIFTUP A/S +45 9686 3020
Hagensvej 21 mail@liftup.dk
9530 Støvring www.liftup.dk

